




GMS  
by **schein**

**TECHNISCHER  
KATALOG**

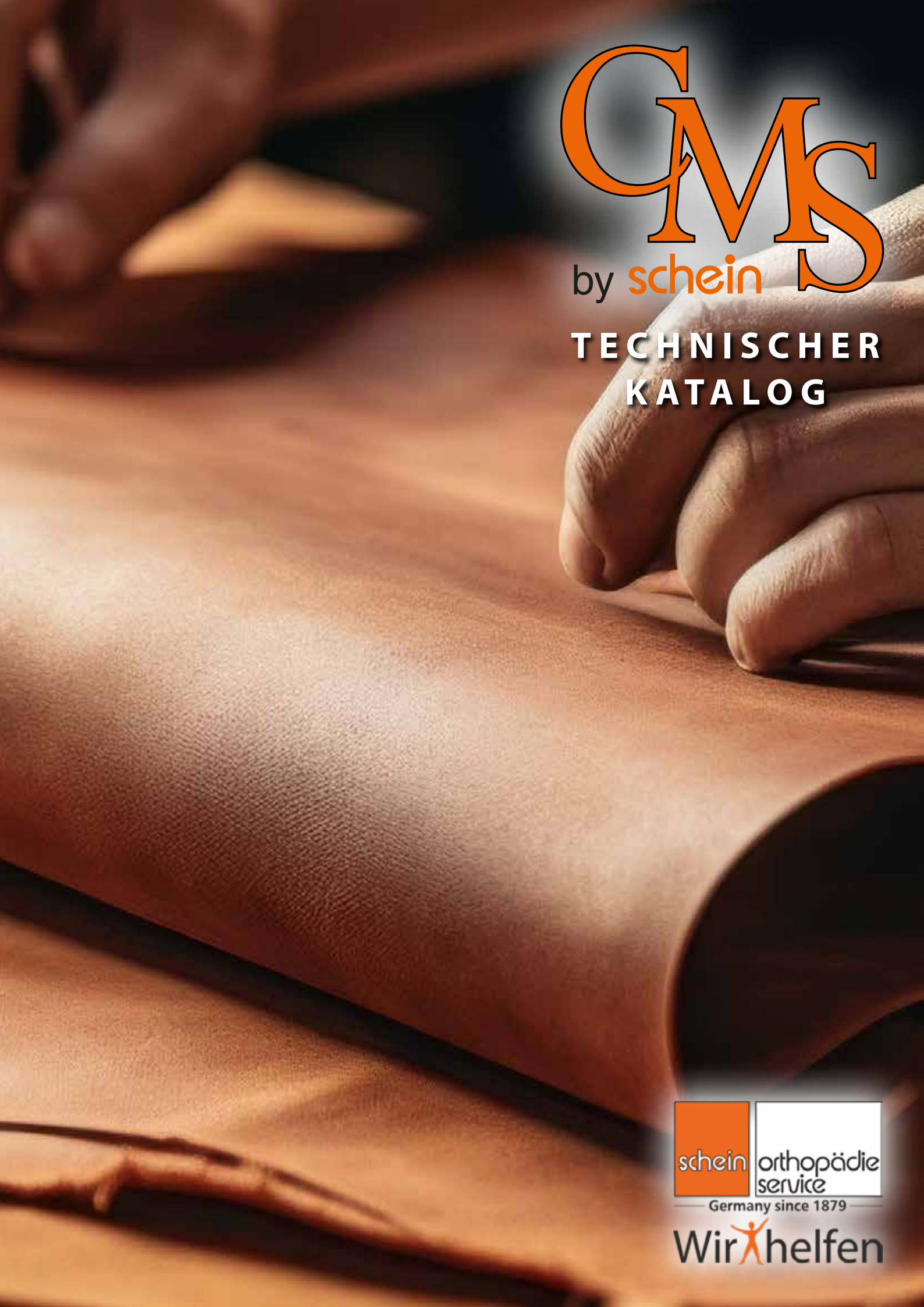

Germany since 1879

**Wir  helfen**





**Liebe Kunden,**

## **Perfekte Passform für mehr Mobilität – Custom Made Shoes (CMS)**

In diesem Katalog finden Sie eine detaillierte Übersicht der technischen Spezifikationen und Materialien für unseren Produktbereich CMS - Custom Made Shoes. Jedes Element spielt eine entscheidende Rolle, um höchsten Tragekomfort, optimale Unterstützung und eine passgenaue Versorgung sicher zustellen. Von Aufbaumaterialien über Versteifung- / Verstärkungsmaterial bis hin zu Zusatzprodukten – wir bieten Ihnen alle wichtigen Informationen, um individuell angefertigte Schuhe nach medizinischen und ergonomischen Anforderungen zu gestalten.

In unserem technischen Katalog finden Sie nicht nur umfassende Informationen zu den verwendeten Materialien, sondern auch zu unseren Zusatzprodukten wie Interimsschuhe, Badeschuhe und Hausschuhe. Darüber hinaus erhalten Sie detaillierte Einblicke in technische Spezifikationen, darunter Messpunkte, Sägeoptionen, Polsterungen und vieles mehr. Unser Anspruch ist es, handwerkliche Tradition mit innovativen Technologien zu verbinden, um eine bestmögliche Versorgung für Ihre Patienten zu gewährleisten. Entdecken Sie die Vielfalt der Anpassungsmöglichkeiten und die Qualität, die in jedem Maßschuh steckt!


### **Inhaltsverzeichnis**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Aufbaumaterialien Bettungen                                | 5  |
| Verstärkungsmaterialien                                    | 6  |
| Bodenbaumaterial Rahmen                                    | 8  |
| Bodenbaumaterialien                                        |    |
| - Verschalungen                                            | 10 |
| - Absatzmaterialien                                        | 11 |
| - Sohlenmaterialien                                        | 12 |
| - Leichtgewichtige Formsohlen                              | 13 |
| - Strapazierfähige Formsohlen                              | 14 |
| - Farbige Formsohlen                                       | 15 |
| Zubehör (Verschlüsse)                                      | 16 |
| Zubehör                                                    |    |
| - Gefräste Bettungen                                       | 20 |
| - Gefräste Leisten                                         | 21 |
| - Hausschuhe                                               | 22 |
| - Sockenschuhe und Badeschuhe                              | 23 |
| - Interimsschuhe                                           | 24 |
| Technische Spezifikationen Interimsschuhen / Informationen |    |
| - Hinterkappen                                             | 26 |
| - Schaftenteilung und Messpunkte                           | 28 |
| - Absatzsprengung / Absatzrolle                            | 29 |
| - Absatzpuffer / Absatztypen                               | 31 |
| - Verschalungstypen                                        | 32 |
| - Schaftpolster                                            | 33 |
| - Sägeoptionen                                             | 34 |
| - Rollen-Typen                                             | 35 |






# Aufbaumaterialien Bettung

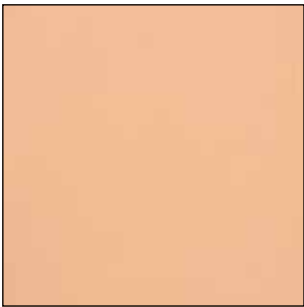


**Plastazote**

Stärke: 3 und 6 mm  
Farbe: rosa

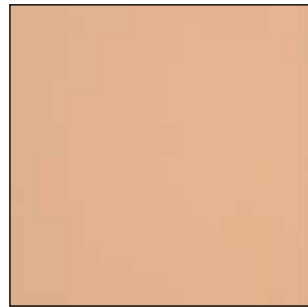


**PPT**

Stärke: 3 und 6 mm  
Farbe: hautfarbe

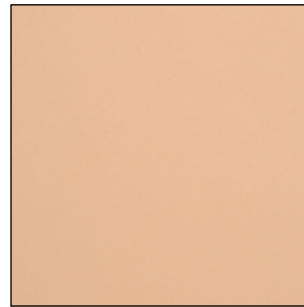

**Multiform**

Stärke: 3, 6 und 10 mm  
Farbe: rosa

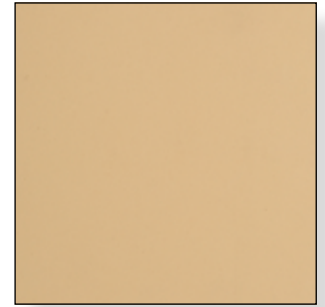

**Luna-Air-Flex**

Stärke: 8 mm  
Farbe: camel



**Kork**

Stärke: 5 mm  
Farbe: braun



**Microkork**

Stärke: 5 und 10 mm  
Farbe: braun




**Presskork**

Stärke: 5 und 10 mm  
Farbe: braun



**Multiform Oberschicht**

Härte 25 Shore A  
Stärke: 3, 5 und 10 mm  
Farbe: rosa

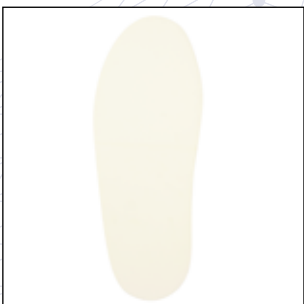


**EVA-flex Oberschicht**

Härte 45 Shore  
Stärke: 6 und 10 mm  
Farbe: weiß



**Combi Shore**

Härte 25 Shore vorne,  
45 shore hinten  
Stärke: 10 mm  
Farben: rosa/weiß

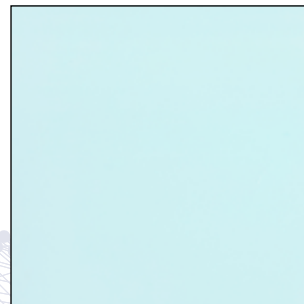

**Interflex**

Stärke: 1 mm  
Farbe: blau



**Thermoversteifung**

Stärke: 2 mm  
Farbe: weiß

# Verstärkungsmaterialien

## Kappenmaterial



**Erkoflex**

Stärke: 2 und 3 mm  
Farbe: Transparent




**Rhenoflex**

Stärke: 1,9 mm  
Farbe: weiß




**Interflex**

Stärke: 1 mm  
Farbe: grau

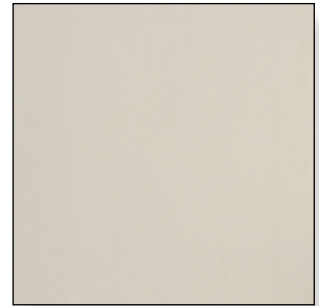

**Corith**

Stärke: 4 mm  
Farbe: hell grau

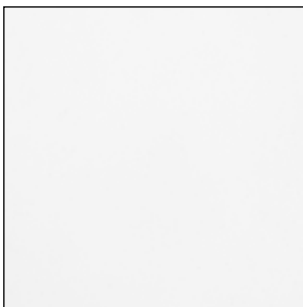

**Polypropylen**

Stärke: 6 mm  
Farbe: Transparent



**Berlaflex**

*Flexibel*  
Stärke: 1,6 mm  
Farbe: weiß




**Leder-Hoch**

Stärke: 2,5 mm  
Farbe: camel



**Rhenoflex**

Stärke: 1,5 und 1,8 mm  
Farbe: weiß

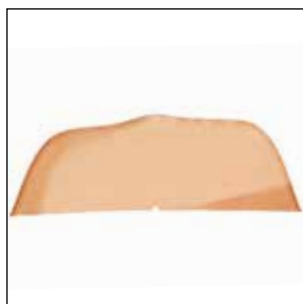


**Leder**

Stärke: 2,5 mm  
Farbe: camel



**Interflex Vorderkappe**

Stärke: 1,2 mm  
Farbe: weiß

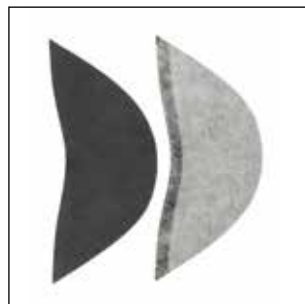

**Ping pong Vorderkappe**

Stärke: 1,2 mm  
Farbe: schwarz



**Aluminium Vorderkappen**

kein Arbeitssicherheitsschutz  
Leichtgewichtige Vorderkappe  
Stärke: 3 mm  
Farbe: grau



# Verstärkungsmaterialien



**Schein Clever  
fest, orange**

Stärke: 2,7 mm  
Farbe: orange




**Schein Clever  
flexibel, grau**

Stärke: 2,4 mm  
Farbe: grau




*Fordern Sie bei Interesse gerne  
unseren Katalog an!  
Alternativ können Sie uns jederzeit  
auf unserer Website besuchen:  
[www.schein.de](http://www.schein.de)  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage*

## Brandsohlen/Sohlenversteifung

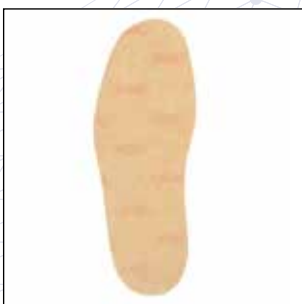

**Brandsohle Biagioli**

Stärke: 2 mm  
Farbe: beige

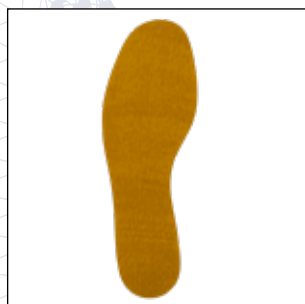

**Brandsohle Leder**

Stärke: 2,5 mm  
Farbe: beige



**Brandsohle  
durchtrittssicher**

Stärke: 3,5 mm  
Farbe: weiß




**Carbon  
Sohlenversteifung**

Stärke: 3,2 mm  
Farbe: schwarz


# Bodenbaumaterialien

## Rahmen

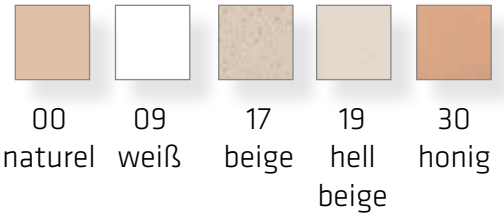

**EVA Rahmen 3**

Farben: 09, 17, 19, 31, 41, 46, 56, 78 und 81

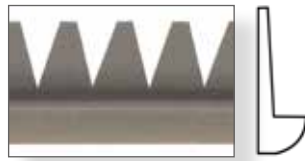

**EVA Rahmen 6**

Farben: 09, 17, 19, 41, 46, 56, 78 und 81



**EVA Rahmen 7**

Farben: 46 und 81



**EVA Rahmen 7 mit Naht**

Farben: 17, 46 und 81



**Gummirahmen 24**

Farben: 46 und 81



**Gummirahmen 25**

Farben: 17, 19, 46 und 81



**Gummirahmen 26**

Farben: 00, 17, 46 und 81



**Gummirahmen 31**

Farben: 17, 46 und 81



**Gummirahmen 32**

Farben: 46 und 81



**Gummirahmen 36**

Farben: 17, 19, 46 und 81



**Gummirahmen 39**

Farben: 46 und 81



**Gummirahmen 40**

Farben: 46 und 81



**Gummirahmen 41**

Farbe: 81



**Gummirahmen 42**

Farben: 46 und 81



**Gummirahmen 44**

Farben: 46 und 81



**Gummirahmen 47**


Farben: 46 und 81



**Gummirahmen 49**

Farben: 46 und 81

Der Großteil der verwendeten Bodenbaumaterialien ist bei RuckgaberBrüggemann erhältlich! Weitere Informationen können Sie jederzeit auf unserer Website entnehmen: **ruckgaber.de** RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service GmbH. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

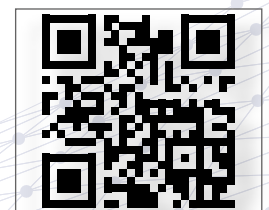



35 41 46 56 78 81  
mittel braun taupe braun grau blau schwarz  
braun

# Bodenbaumaterialien

## Rahmen



**Lederrahmen 82**

Farben: 00, 46 und 81



**Lederrahmen 84**

Farben: 46 und 81



**Lederrahmen 85**

Farbe: 00



**Lederrahmen 340**

Farbe: 00



**Lederrahmen 361-81**

Farbe: 81



**Lederrahmen 363-46**

Farbe: 46




**Lederrahmen 365-00**

Farbe: 00




**Lederrahmen 500-81**

Farbe: 81

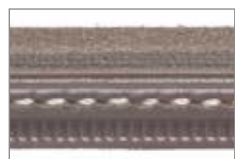

**Lederrahmen 501-46**

Farbe: 46

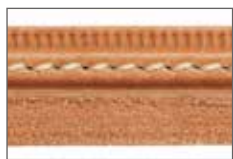

**Lederrahmen 502-00**

Farbe: 00



**Lederrahmen 600-81**

geeignet für flexible Machart  
Farbe: 81



**Lederrahmen 601-46**

geeignet für flexible Machart  
Farbe: 46



**Lederrahmen 640-81**

geeignet für flexible Machart  
Farbe: 81



**Lederrahmen 641-46**


geeignet für flexible Machart  
Farbe: 46





# Bodenbaumaterialien

## Verschalung

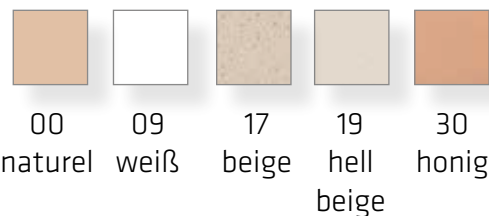

**Gummi Diamond**

Farben: 09, 17, 46, 56, 78 und 81



**Gummi Diamond mit Nahtrille**

Farben: 09 und 81



**Gummi Stone**

Farben: 09, 17, 19, 41, 46, 56, 78 und 81



**Gummi Stone mit Nahtrille**

Farben: 09 und 81




**Gummi Laverø**

Farben: 09, 17, 19, 41, 46, 56, 78 und 81



**Fersenverschalung**

Farben: blau, braun, grau, rot und schwarz

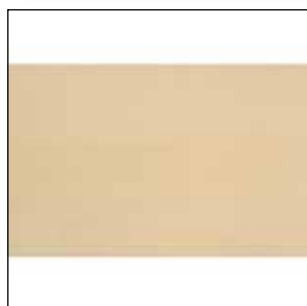

**EVA Verschalung**

Farben: 09, 17, 19, 31, 41, 46, 56, 78 und 81



**Laverø Gummi**

Farbe: 81




**Laverø Gummi**

Farbe: 17




**Laverø Gummi**

Farbe: 19

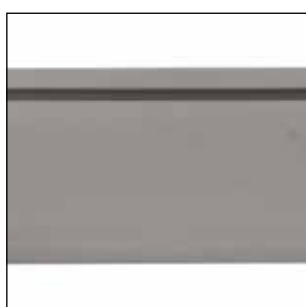


**Solor Verschalung**

Farbe: grau mit schwarzer Naht

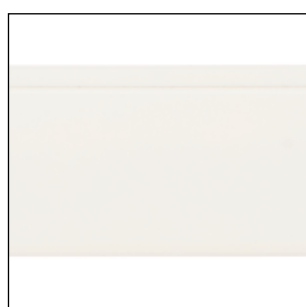

**Solor Verschalung**

Farbe: weiß

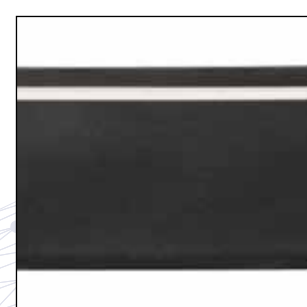

**Solor Verschalung**



Farbe: schwarz mit weißer Naht



35 41 46 56 78 81  
mittel taupe braun grau blau schwarz  
braun

# Bodenbaumaterialien

## Aufbau

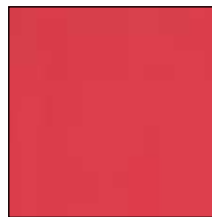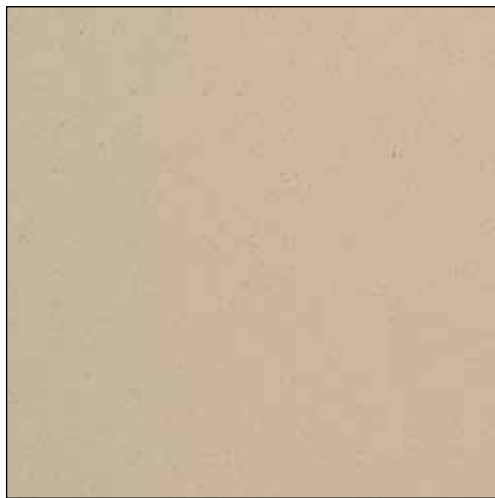

### EVA Aufbaumaterial

Härte: 50 Shore  
Farben: grün, blau  
rot und gelb

### EVA Aufbaumaterial

Härte: 35, 50 und 65 Shore  
Farben: 09, 17, 19, 31, 41, 46, 56,  
78 und 81

## Absatzmaterial



### Herren Absatzfleck

Stärke: 7mm  
Farben: 46 und 81



### Herren Absatzfleck

Stärke: 7mm  
Farbe: blau




### Herren Absatzfleck

Stärke: 7mm  
Farbe: rot



### Gummisohle

Stärke: 2,5mm  
Farben: 46 und 81

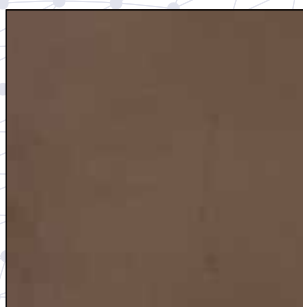

### Nylon Absatzfleck

Stärke: 6mm  
Farben: 30, 46 und 81



### Lederfaser-Blockabsatz




### Blockabsatz (aus Holz)



### Lederbezug für Blockabsatz (aus Holz)

## Leichtgewichtige Sohlen

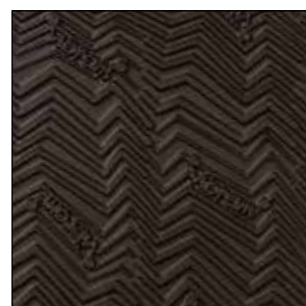

Vibram 8870

Stärke: 5 mm  
Farben: 81 und 46

EVA Gummi Anna

Stärke: 4 und 6 mm  
Farben: 09, 17, 19, 35, 41, 46,  
56, 78 und 81



Conti Control FB

Öl- und Säurebeständig  
Stärke: 7 mm  
Farbe: 81






35 41 46 56 78 81  
mittel taupe braun grau blau schwarz  
braun

# Bodenbaumaterialien

## Formsohlen

### Leichtgewichtige Formsohlen

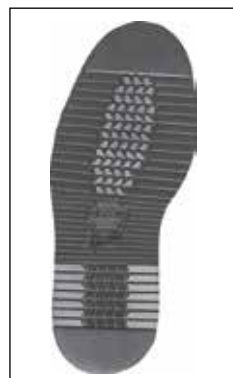

**Vibram 2644**

**Stärke:**  
6 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram 2655**

**Stärke:**  
7 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram 2667**

**Stärke:**  
8 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram 2668**

**Stärke:**  
8 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram 2640**

**Stärke:**  
10 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram 2678**

**Stärke:**  
9 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram 2810**

**Stärke:**  
8 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram 2600**

**Stärke:**  
8,5 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram 2609**

**Stärke:**  
9 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram 2603**

**Stärke:**  
12 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram 528**

**Stärke:**  
12 mm

**Farben:**  
46 und 81



**Vibram Morflex**

**Stärke:**  
15 mm

**Farbe:**  
81

# Bodenbaumaterialien

## Formsohlen

### Abriebfeste Formsohlen

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 00<br>naturel                                                                       | 09<br>weiß                                                                          | 17<br>beige                                                                         | 19<br>hell<br>beige                                                                 | 30<br>honig                                                                         |



**Mountain**

Stärke:  
6 mm

Farben:  
30, 46 und 81



**Vibram 1136**

Stärke:  
8 mm

Farben:  
30, 46 und 81



**Vibram 1220**

Stärke:  
8 mm


Farben:  
30, 46 und 81



**Vibram 2002**

Stärke:  
6 mm

Farben:  
46 und 81

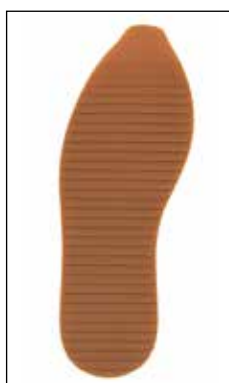

**Jony Sohle**

Stärke:  
6 mm

Farben:  
09, 17, 19, 30, 46,  
56 und 81



**Topy Sevilla**

Stärke:  
6 mm

Farben:  
46 und 81



**Mammoth**

Stärke:  
8 mm

Farbe:  
81



**Flensburg PUT**

Stärke:  
8 mm

Farbe:  
81



**Jura**

Stärke:  
10 mm

Farbe:  
81



**5001**

Stärke:  
11 mm

Farbe:  
81



**Lübeck PUT**

Stärke:  
9 mm

Farbe:  
81



**Kiel**

Stärke:  
7 mm


Farbe:  
81




35 41 46 56 78 81  
mittel taupe braun grau blau schwarz  
braun

# Bodenbaumaterialien

## Farbige Sohlenmaterialien

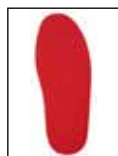

102 rot

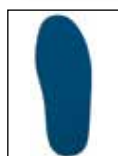

103 blau




102 rot



103 blau



34 orange

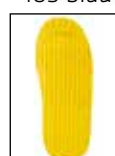

32 gelb



46 braun




81 schwarz

EVA Astro Light Delta

Stärke: 6 mm  
Farben: 102 und 103

Autoband

Stärke: 8 mm  
Farben: 32, 34, 46, 81, 102 und 103

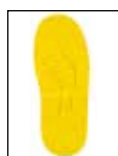

32 gelb



34 orange



38 grün



102 rot



56 grau



103 blau



81 schwarz



46 braun



09 weiß

Sportflex

Stärke: 8 mm  
Farben: 09, 32, 34, 38, 46, 56, 81, 102 und 103





# Zubehör

## *Schnallen, Ösen und Haken*




**Kleine Ösen 8mm**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Hell gebrannt  
Nickel



**Große Ösen 12mm**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Hell gebrannt  
Nickel

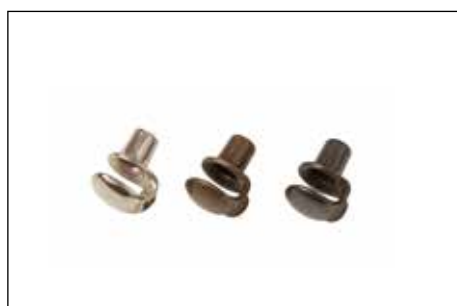

**Kleine Haken**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Hell gebrannt  
Nickel



**Große Haken**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Hell gebrannt  
Nickel



**Sechseck Ösen**

Farbe:  
Dunkel gebrannt



**Skihaken**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Hell gebrannt  
Nickel



**Militärhaken**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Hell gebrannt  
Nickel



**Easy Rollers**

Farbe:  
Dunkel gebrannt



**Haken massiv**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Hell gebrannt  
Nickel

# Zubehör

## *Schnallen, Ösen und Haken*



**Einhandverschluss**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Nickel



**Nieten 5mm**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Hell gebrannt  
Nickel



**Schmetterlings-schnalle**

Farben:  
Dunkel gebrannt,  
Hell gebrannt,  
Nickel  
Gold



**Joti-Schnalle**

Farben:  
Dunkel gebrannt,  
Hell gebrannt,  
Nickel  
Gold



**PVC Schnalle**

Farben:  
Schwarz



**Rollschnalle**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Hell gebrannt  
Nickel



**Halbkreisförmiger Ring**

Farben:  
Dunkel gebrannt  
Hell gebrannt  
Nickel



**Drehverschluss**

Lasche  
Medial  
Lateral  
Ferse







# Zusatzprodukte

## *Gefräste Bettungen*

Mit gefrästen Bettungen steigern wir die Reproduzierbarkeit Ihrer Bettungen maßgeblich. Sowohl die Ober- als auch die Unterseiten werden digital gestaltet und anschließend millimetergenau ausgefräst. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Produktionsgeschwindigkeit. Die von uns eingesetzten Fräsblöcke zeichnen sich durch ihre hohe Formstabilität aus und lassen sich besonders leicht verarbeiten. Profitieren Sie von Präzision und Effizienz auf höchstem Niveau!

### **FOLGENDE SHORE-HÄRTEN KÖNNEN AUSGEWÄHLT WERDEN**

- 30 Shore
- 40 Shore
- 50 Shore
- 20/50 Combi-Shore



30  
SHORE



40  
SHORE



50  
SHORE



20/50  
COMBI-  
SHORE

# Zusatzprodukte

## *Gefräste Leisten*

**BEIN-  
LEISTEN**



Wir entwickeln Ihre Leisten basierend auf 3D-Scans oder Cast-Abdrücken und modellieren diese ganz nach Ihren Vorstellungen. Nutzen Sie eine eigene Software zur Modellierung von Leisten?

Kein Problem – stellen Sie uns einfach Ihre fertig bearbeitete STL-Datei zur Verfügung, und wir übernehmen die präzise Fräsung für Sie unsere Leisten werden aus hochwertigem Buchenholz gefertigt und garantieren Langlebigkeit sowie exzellente Qualität.


**HALB-  
SCHUH-  
LEISTEN**



### **PROBESCHUHE**

Wir liefern Probeschuhe in Kombination mit passenden Bettungen und Leisten. Auf Wunsch fertigen wir auch zu einem bestehenden Leisten die entsprechende Bettung und einen Probeschuh an, um die Passgenauigkeit am Kunden zu überprüfen. Profitieren Sie von unserer individuellen Fertigung für optimale Ergebnisse.

**FOLIEN-  
SCHUH**

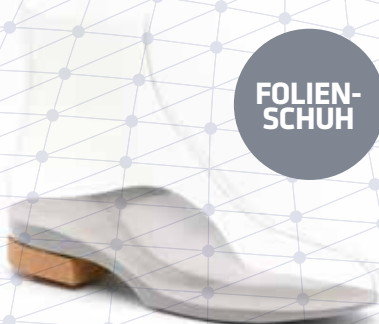

**LEISTEN,  
BETTUNG  
UND  
PROBESCHUH**





# Zusatzprodukte

## Hausschuhe

### PRODUKT

Unsere Hausschuhe sind die ideale Wahl für Personen mit geringen orthopädischen Abweichungen und bieten sowohl Funktionalität als auch Stil. Diese Modelle zeichnen sich durch eine leichte und einfache Ausführung aus. Bitte beachten Sie, dass sich ihre Eigenschaften von einem orthopädischen Maßschuh unterscheiden, da Anpassungen wie z. B. eine Arthrodesenkappe nicht möglich sind.

**Modell SP05:** Ein knöchelhoher Stiefel im Design eines Schnürschuhs. Standardmäßig mit einem praktischen Klettverschluss ausgestattet, kann das Modell auf Wunsch auch mit Schnürung angefertigt werden.

**Modell SP07:** Ein flach geschnittener Slipper im Halbschuh-Design, der ebenfalls mit einem bequemen Klettverschluss überzeugt.

Beide Modelle werden individuell nach Ihrem persönlichen Leisten und Ihrer gewünschten Bettung gefertigt – für optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Unsere Hausschuhe vereinen hochwertige Materialien und durchdachtes Design:

- Gefertigt aus weichem und widerstandsfähigem Pantex-Material mit einer 5 mm dicken Schaumstoffschicht.
- Erhältlich in drei ansprechenden Farben.
- Ausgestattet mit einer Erkoflex-Hinterkappe, einem Voll-Keilabsatz und einer 6 mm Laverio-Sohle aus weichem EVA.
- Das Futter besteht aus komfortablem Sanino-Schaumstoff.
- Für einen einfachen Einstieg sind die Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle gestaltet.
- Bitte beachten Sie: Unsere Hausschuhe sind keine orthopädischen Schuhe und bieten daher nur eine einfache Versorgung. Technische und optische Änderungen sind nicht möglich.



SP05



SP07



Pantex

Stärke: 6mm  
Farben: braun



Pantex

Stärke: 6mm  
Farben: schwarz



Pantex

Stärke: 6mm  
Farben: blau

### BESTELLVERFAHREN

Der Hausschuh kann bequem über unser Bestellportal auf der Website [www.appschein.com](http://www.appschein.com) bestellt werden. Im Bestellportal stehen Ihnen bereits hinterlegte Vorlagen zur Verfügung, die eine einfache und schnelle Bestellung ermöglichen.

# Zusatzprodukte

## Sockenschuhe



### PRODUKT

Sockenschuhe sind speziell für Personen konzipiert, die dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen sind, und bieten zuverlässigen Schutz für die Füße.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Unsere Sockenschuhe verbinden Flexibilität und Komfort mit individueller Anpassung:

- Standardmäßig ohne Fußbett gefertigt, optional mit Bettung und Brandsohle erhältlich.
- Die Innenseite besteht aus dem von Ihnen gewählten Futtermaterial.
- Die Außenseite wird in hochwertigem Oberleder nach Ihrer Wahl gefertigt.
- Für zusätzlichen Halt kann eine Antirutschsohle integriert werden.
- Jeder Sockenschuh wird individuell angepasst - Sie können Modell, Ausführung und Verschlussart frei wählen.
- Verschlussoptionen: Ösen und Haken oder Klettverschlüsse, mit oder ohne Umlenkrolle.

Ein Produkt, das perfekt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt ist!

### BESTELLVERFAHREN

Der Sockenschuh kann ganz einfach über unser Bestellportal auf der Website **www.appschein.com** bestellt werden. Im Portal haben Sie die Möglichkeit, Ihr Produkt individuell anzupassen. Wählen Sie aus verschiedenen Optionen, wie z. B. Materialien, Farben und Verschlüssen, um das Produkt genau nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Zudem stehen Ihnen hinterlegte Vorlagen zur Verfügung, die eine schnelle und unkomplizierte Bestellung ermöglichen.

## Badeschuhe

HYDRO



AQUA

### PRODUKT

Ideal für den Einsatz in Dusche und Badewanne, überzeugen unsere Badeschuhe mit ihrer Vielseitigkeit. Sie sind robust gegenüber Chlor-, Süß- und Salzwasser und bieten zuverlässigen Schutz. Bitte beachten Sie, dass diese Schuhe speziell für den Gebrauch im Wasser entwickelt wurden - sie sind keine Wander- oder Laufschuhe. Perfekt für entspannte Momente im Nass!

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Das Obermaterial besteht aus 3 mm festem EVA und benötigt **keine** zusätzliche Härtung.
- Die Fütterung besteht aus 5 mm weichem EVA-Schaum für angenehmen Tragekomfort.
- Die Schuhe sind ausschließlich in der Farbe Blau erhältlich.
- Sie verfügen über einen praktischen Klettverschluss mit einer stabilen Umlenkrolle aus Kunststoff.
- Schafthöhe und Absatzsprengung können individuell gewählt werden.
- Die rutschfeste Laufsohle sorgt für sicheren Halt.
- Das Design ist einheitlich und ohne störende Teilungen.
- Der Bodenbau entspricht dem gewählten Modell und kann nicht verändert werden.

Praktisch, bequem und hochwertig - perfekt für den Alltag im Nassbereich!

### BESTELLVERFAHREN

Der Badeschuh kann ganz einfach über unser Bestellportal auf der Website **www.appschein.com** bestellt werden. Im Portal haben Sie die Möglichkeit, Ihr Produkt teilweise individuell anzupassen. Zudem stehen Ihnen hinterlegte Vorlagen zur Verfügung, die eine schnelle und unkomplizierte Bestellung ermöglichen. Bitte beachten Sie, dass wir zur Fertigung eine Bettung aus 100% EVA-Materialien benötigen.

# Zusatzprodukte

## Interimsschuhe

### PRODUKT

Unsere Interimsschuhe sind provisorische Schuhe, die häufig als Rehabilitationsschuhe eingesetzt werden. Sie dienen dazu, Patienten schnell und unkompliziert zu versorgen. Diese Modelle zeichnen sich durch eine einfache Ausführung aus und werden später durch einen endgültigen orthopädischen Maßschuh ersetzt. Wir bieten Ihnen vier verschiedene Modelle zur Auswahl:

- **Modell D01:** Eine Leder-Ausführung im klassischen Standard-Derbyschnitt.
- **Modell AAD02:** Eine Leder-Ausführung im Weitöffner-Derbyschnitt, auch als Schlittschuhschnitt bekannt.
- **Modell R03:** Eine Leder-Ausführung im U-Schnitt, auch Blattschnitt genannt.
- **Modell RV04:** Ein U-Schnitt, auch Blattschnitt genannt, gefertigt aus Filz.

Unsere Interimsschuhe bieten eine schnelle und praktische Lösung, um die Mobilität des Patienten zu unterstützen, bis der maßgeschneiderte orthopädische Schuh bereit ist.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Obermaterial: Zwei Varianten verfügbar: schwarzes Leder (für **Modelle D01, AD02, R03**) oder Filzmaterial (für Modell RV04).
- Innenfutter: Modelle aus Leder sind mit einem Innenfutter ausgestattet, während die Filzversion ohne Futter kommt.
- Individuelle Anpassung: Technische Anpassungen wie die Auswahl unterschiedlicher Verschlüsse oder die Anpassung der Hinterkappen sind möglich.



D01



AD02



R03



RV04

### BESTELLVERFAHREN

Der Interimsschuh kann ganz einfach über unser Bestellportal auf der Website [www.appschein.com](http://www.appschein.com) bestellt werden. Im Portal haben Sie die Möglichkeit, Ihr Produkt technisch individuell anzupassen.



# Technische Informationen



# AFO - TVO

## Hinterkappen Varianten



|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AFO-TV0-1</b>  | 1. Schicht 3 mm Erkoflex-Arthrodes<br>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Hinterkappe                            |
| <b>AFO-TV0-1b</b> | 1. Schicht 2 mm Erkoflex-Arthrodes<br>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Hinterkappe                            |
| <b>AFO-TV0-2</b>  | 1. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Arthrodes                                                                    |
| <b>AFO-TV0-3a</b> | 1. Schicht 3 mm Erkoflex-Arthrodes<br>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Arthrodes                              |
| <b>AFO-TV0-3b</b> | 1. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Arthrodes<br>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Arthrodes                           |
| <b>AFO-TV0-4</b>  | 1. Schicht 3 mm Erkoflex, mediale Knöchelkappe<br>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Hinterkappe                |
| <b>AFO-TV0-5</b>  | 1. Schicht 3 mm Erkoflex, laterale Knöchelkappe<br>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Hinterkappe               |
| <b>AFO-TV0-6</b>  | 1. Schicht 1,8 mm Rhenoflex, mediale Knöchelkappe<br>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex, mediale Knöchelkappe   |
| <b>AFO-TV0-6b</b> | 1. Schicht 1,8 mm Rhenoflex, mediale Knöchelkappe                                                        |
| <b>AFO-TV0-7</b>  | 1. Schicht 1,8 mm Rhenoflex, laterale Knöchelkappe<br>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex, laterale Knöchelkappe |
| <b>AFO-TV0-7b</b> | 1. Schicht 1,8 mm Rhenoflex, laterale Knöchelkappe                                                       |



# AFO - TVO

## Hinterkappen Varianten



|                   |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AFO-TV0-8</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schicht 3 mm Erkoflex, mediale und laterale Knöchelkappe</li> <li>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Hinterkappe</li> </ol>                           |
| <b>AFO-TV0-9</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schicht 1,8 mm Rhenoflex, mediale und laterale Knöchelkappe</li> </ol>                                                                         |
| <b>AFO-TV0-10</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schicht 1,8 mm Rhenoflex, mediale und laterale Knöchelkappe</li> <li>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex, mediale und laterale Knöchelkappe</li> </ol> |
| <b>AFO-TV0-11</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schicht 3 mm Erkoflex-Peronaeusfeder</li> <li>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Hinterkappe</li> </ol>                                               |
| <b>AFO-TV0-12</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schicht 3 mm Erkoflex-Peronaeusfeder</li> <li>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Peronaeusfeder</li> </ol>                                            |
| <b>AFO-TV0-13</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Peronaeusfeder</li> <li>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Peronaeusfeder</li> </ol>                                         |
| <b>AFO-TV0-15</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schicht 3 mm Erkoflex-Peronaeusfeder</li> <li>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Hinterkappe</li> </ol>                                               |
| <b>AVO-TV0-16</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schicht 3 mm Erkoflex-Arthrodesse</li> <li>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Peronaeusfeder</li> </ol>                                               |
| <b>AVO-TV0-17</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schicht 2 mm Erkoflex-Arthrodesse</li> <li>2. Schicht 1,8 mm Rhenoflex-Peronaeusfeder</li> </ol>                                               |






# Schafteinteilung und Messpunkte

## Grundlinie

- A: 1/3 Leistenlänge
- B: 2/3 Vorderblattlänge
- C: Leistenlänge
- D: Fersenhöhe

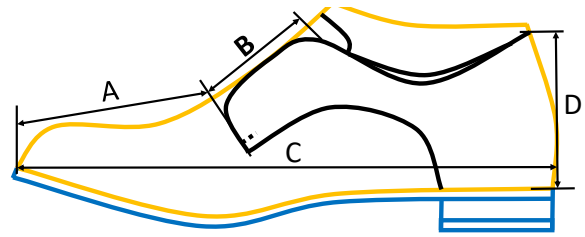

## Abstand

- E: Spitzensprengung
- F: Schaftpolsterhöhe
- G: Schafthöhe
- H: Absatzhöhe




# Fertigungsverfahren Futterschuhe

## Futterschuhe 1 und 2

### Futterschuh 1


- K: 25 mm zusätzliches Futter für die Endbearbeitung
- L: Futterstreifen zum Einkleben

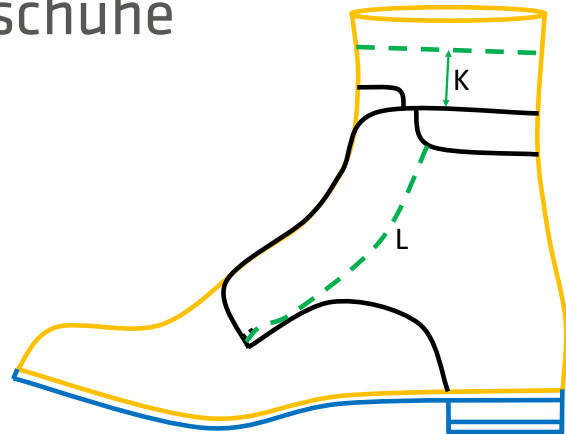

### Futterschuh 2

- K: 25 mm zusätzliches Futter für die Endbearbeitung
- M: Futterstreifen zum Verkleben

Futter auf dem Rist 20 mm überlappend zum Arbeiten ohne Klebestreifen.

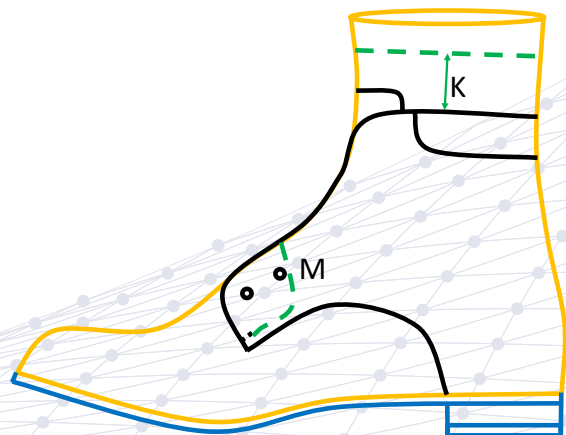

# Messpunkt Absatzsprengung




# Standard Absatzrolle

## Aufbau

### Messpunkt Absatzsprengung

N = lateral Seite Mitte





Die Herrenkeilabsätze sind Standardmäßig 5 mm angeschweift. Die Absätze der Damen sind standardmäßig so weit wie möglich angeschweift.

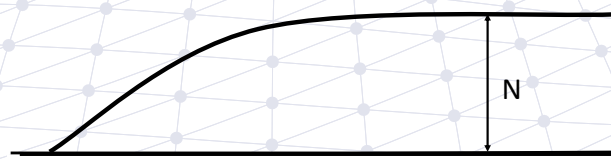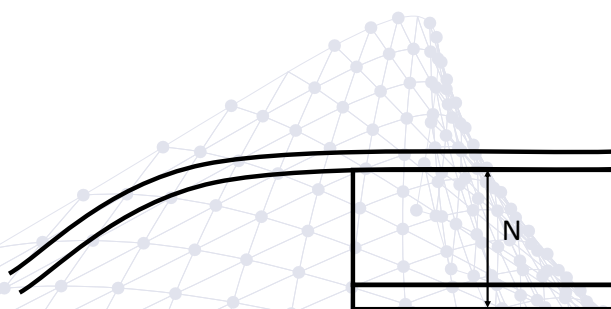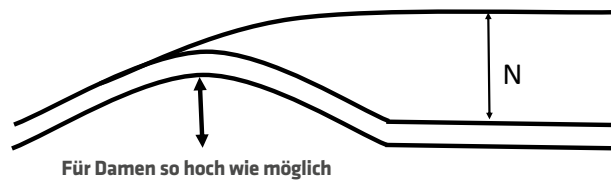

### Standard-Absatzrolle

P = 1/3 der Ferse

Q = 5mm

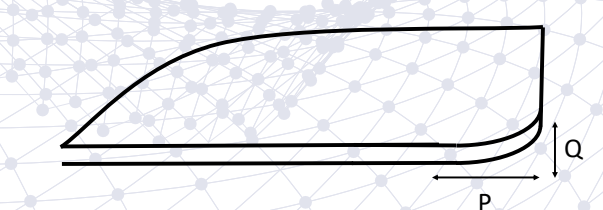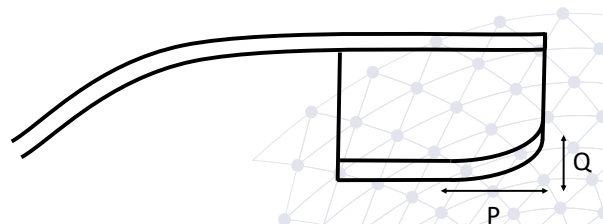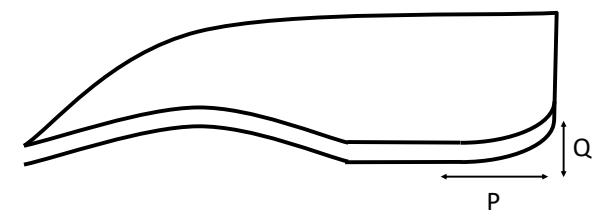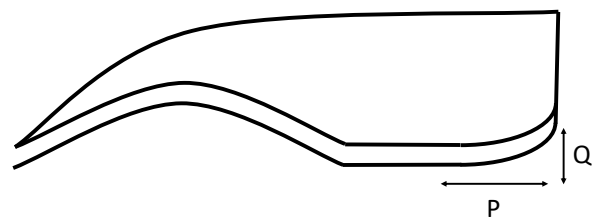






## Standard Pufferabsatz


R: 1/2 Absatzlänge

S: 10 mm

## Pufferabsatz

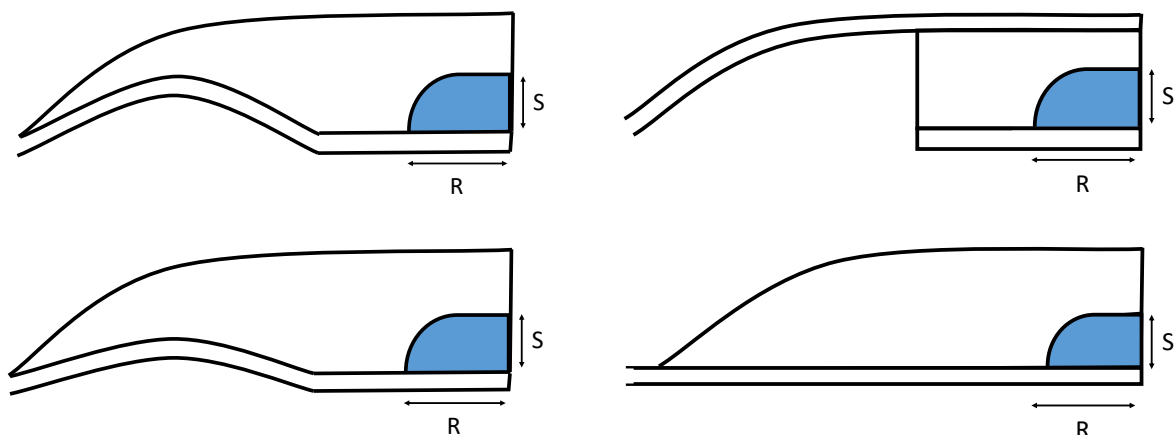

## Absatz-Typen






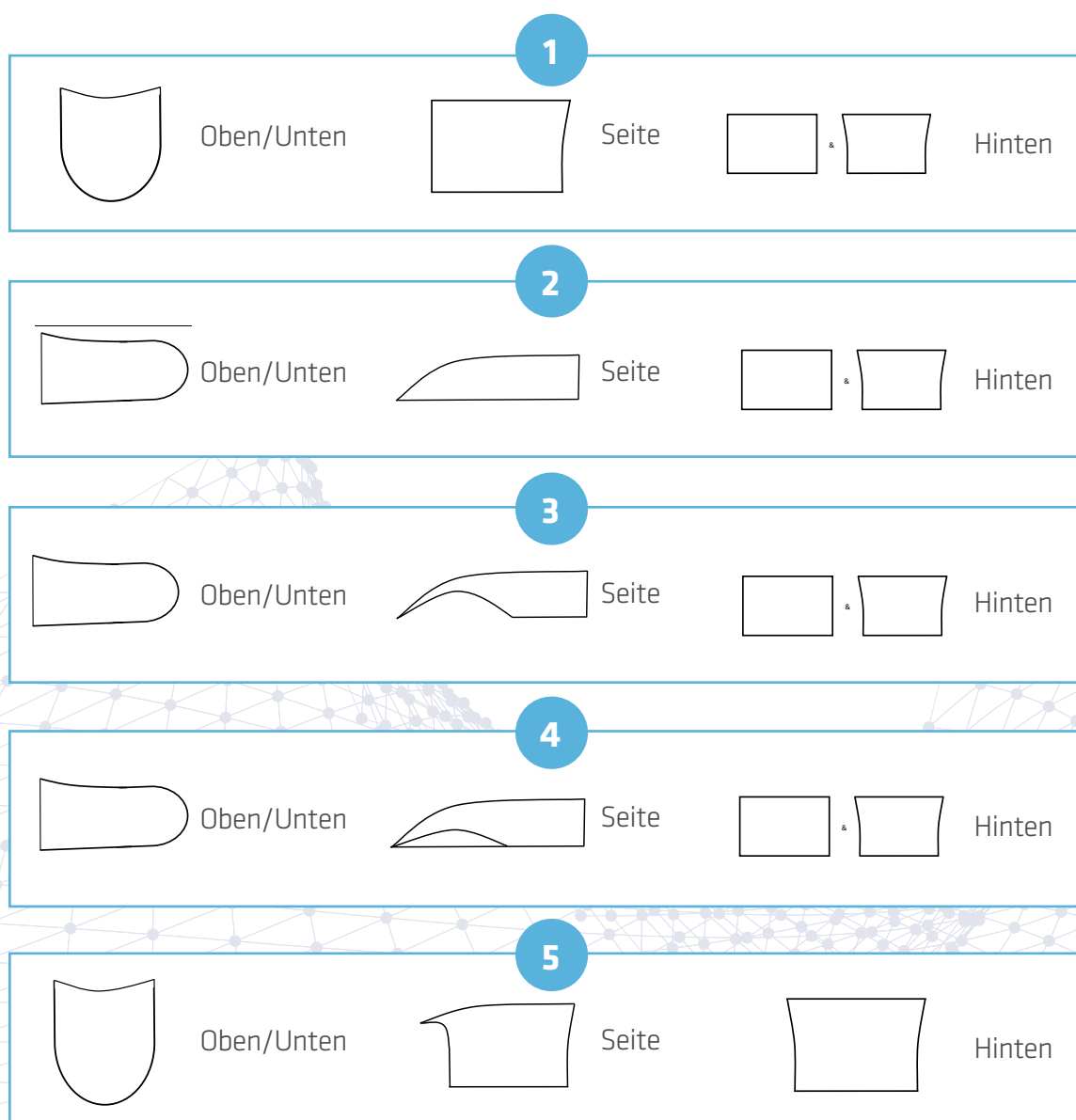


# Verschalungs-Typen

## VERSCHALUNGS-TYP


VZ: Höhe vorne

AZ: Höhe hinten

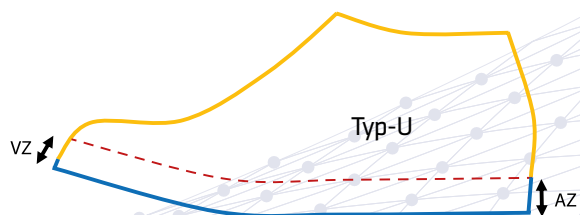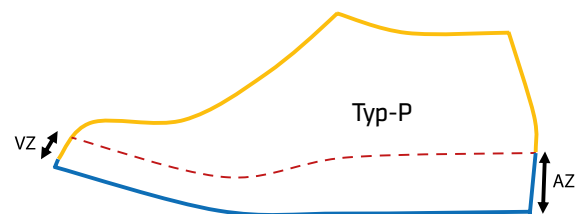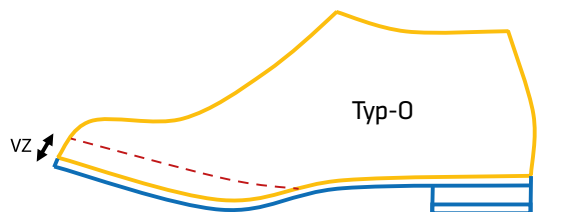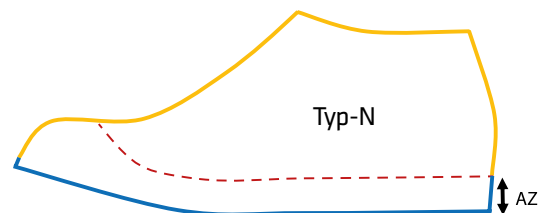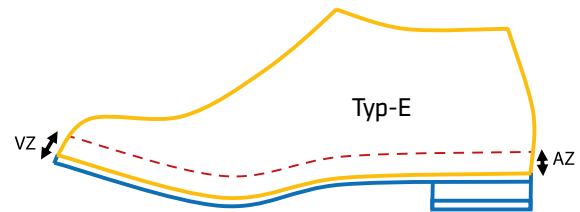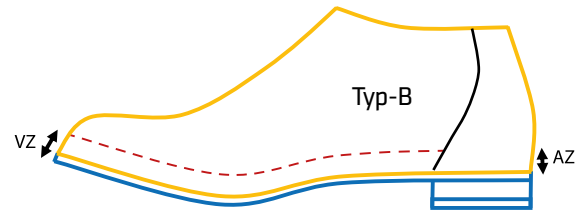


# Schaftpolster


Knöchelpolster, rund

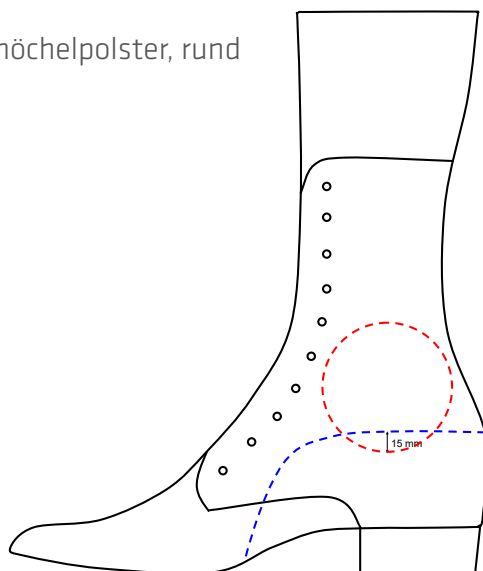

Quartierpolster

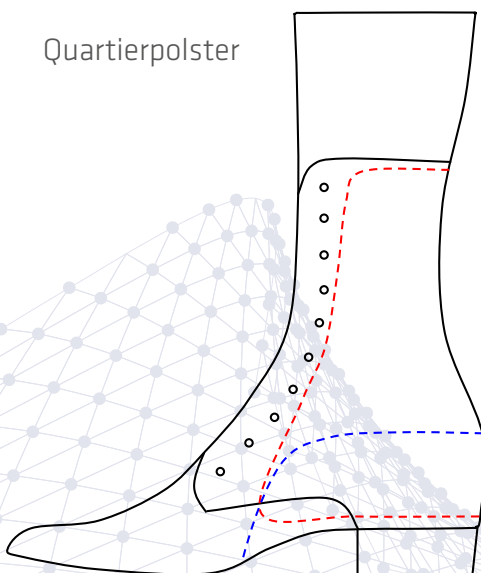



Meindelpolster

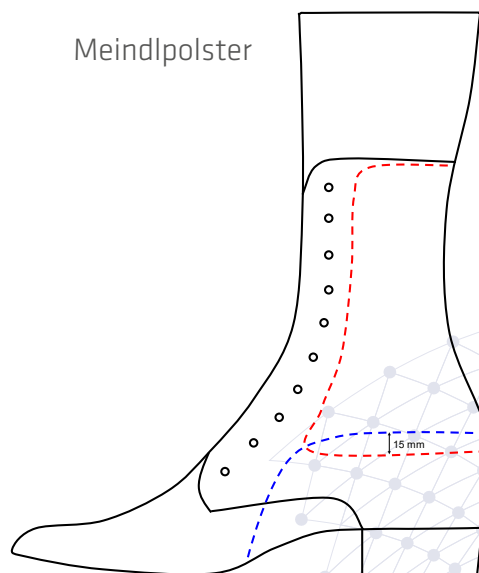




# Sägeooptionen

Für Halbschuh-  
und Knöchelleisten

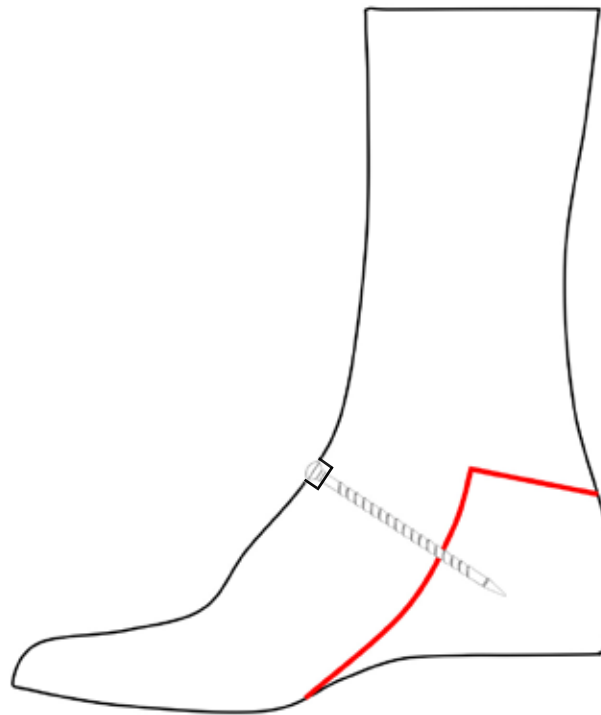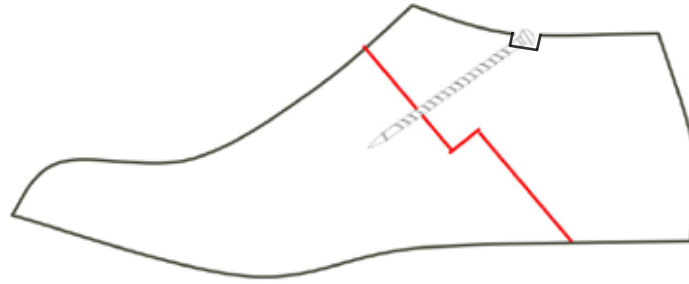

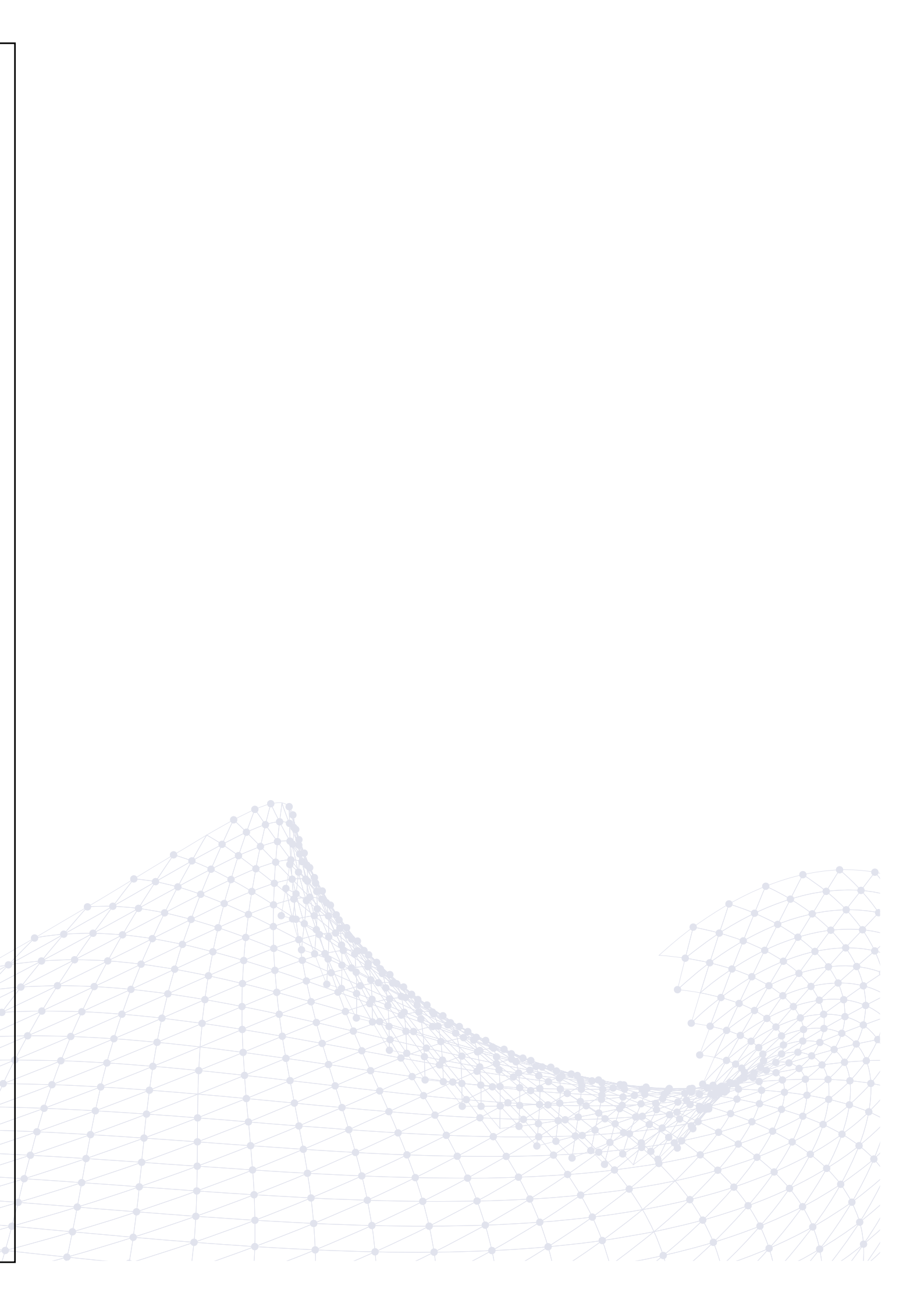

# GMS

by **schein**

Geringfügige Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne Genehmigung der Schein Orthopädie Service KG vervielfältigt werden. Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt.



[WWW.SCHEIN.DE](http://WWW.SCHEIN.DE)