


Novaped

calcaneus
by **schein**

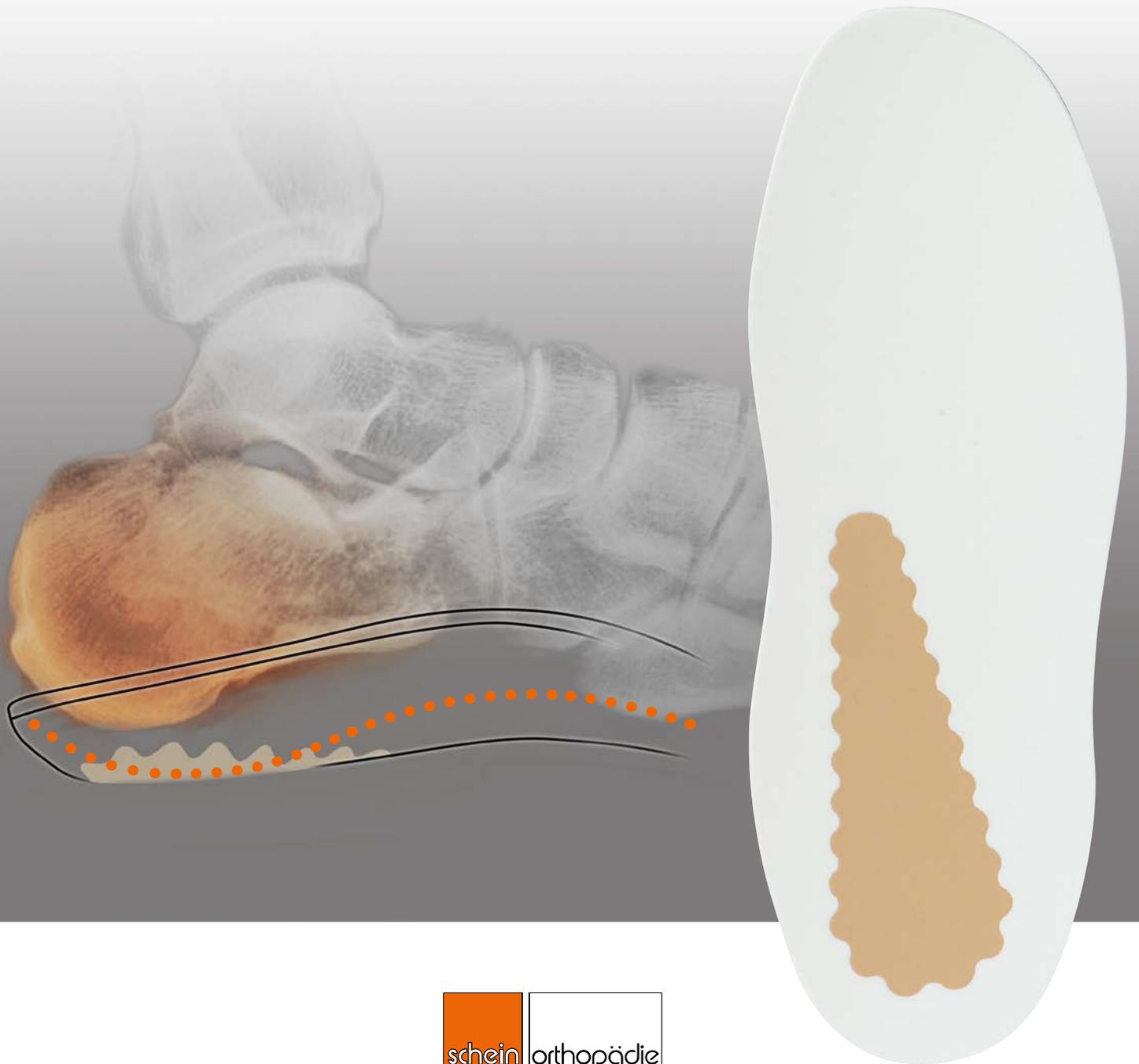

Wir  **helfen**

LEBENSQUALITÄT UND WOHLBEFINDEN
DER MENSCHEN ZU STEIGERN!

NOVAPED CALCANEUS


Die **Novaped calcaneus** Serie ist speziell für den Einsatz bei Überlastungssymptomen oder Schmerzen im Bereich des Calcaneus/Plantarsehnenansatzes konzipiert worden.

Die **Novaped S90 calcaneus** Einlagenrohlinge werden aus einem thermoplastischen Material vorgeformt und haben neben einer anatomisch angepassten Aussparung in der Fersenmitte auch eine Tieferlegung der plantaren Sehnenstruktur.

Der Einsatz von glasfaserverstärkten Bauteilen erhöht die Stabilität im Längsgewölbe. PU-Polstermaterialien in der Ferse wirken dämpfend/stoßabsorbierend und entlastend. Eine weitere Besonderheit ist die Mehrzonentechnik in der Deckenkombination. Die polsternde Deckschicht mit weich bettender Fersenintarsie unterstützt und entlastet gezielt die Fußstruktur.

Die Mehrzonentechnik wird auch in den **Novaped soft calcaneus** Einlagenrohlingen verwendet. Der formgebende Unterbau aus Multiforte wird durch den Einsatz von entlastenden oder absorbierenden PU-Materialien funktionell ausgestattet.

Die Rohlinge der Novaped calcaneus Serie können thermisch verformt/angeformt/beschliffen werden und sind für die Weiterverarbeitung durch den Gesundheitshandwerker bestimmt.

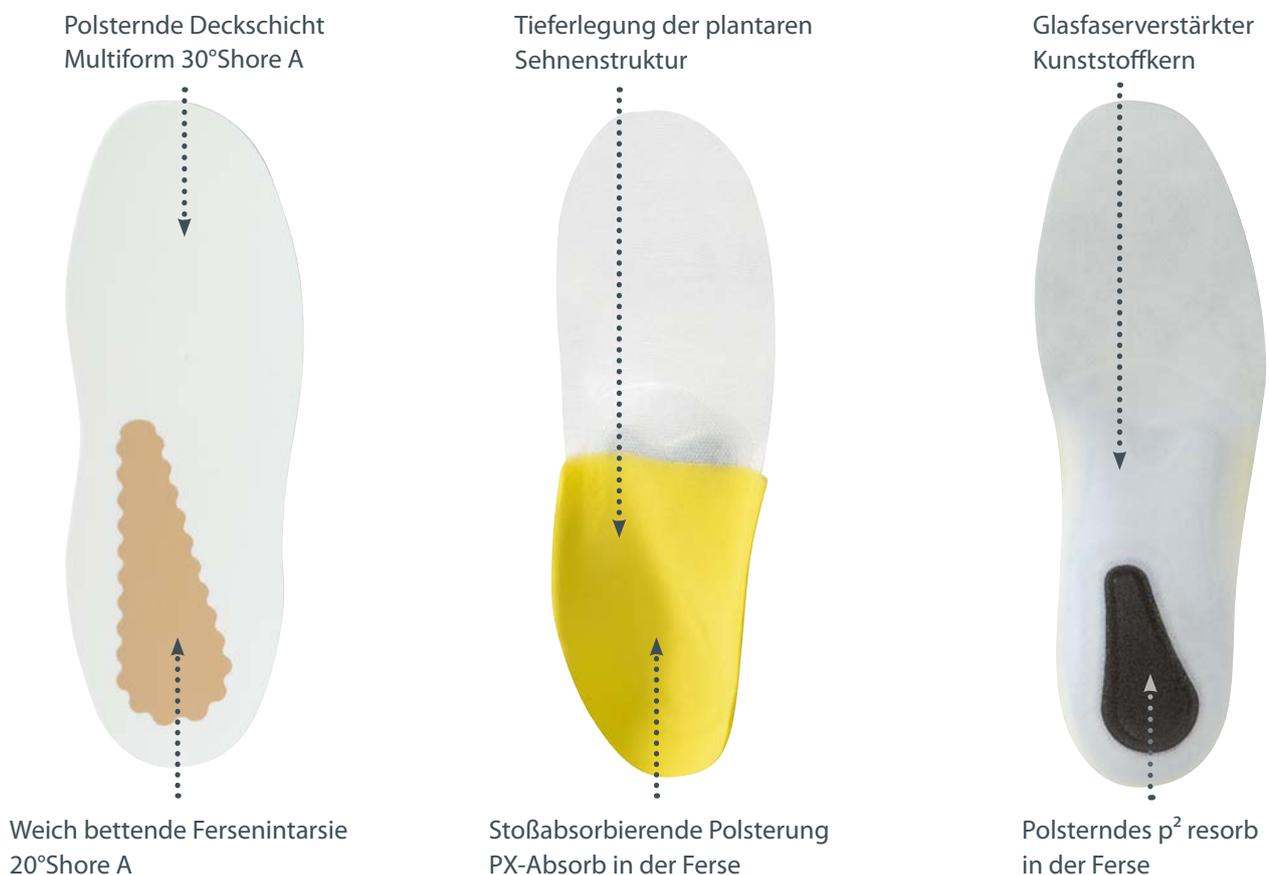

Novaped S90 calcaneus

NOVAPED S90 CALCANEUS BUSINESS

- Stützender Einlagenrohling in Folientechnik
- Glasfaserverstärkter Kunststoffkern
- Tieferlegung Plantarsehnenstruktur
- Fersenpolsterungen aus PU-Polsterelementen (p² resorb/PX absorb)
- Anatomische Gummipelotte
- OnDry-Bezug dunkelgrau geprägt
- Thermisch verformbar

besonders dünn im Vorfuß




Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
989818000	Novaped S90 calcaneus business	35-50
989818174	Novaped S90 calcaneus business, Bezug lose	35-50

NOVAPED S90 CALCANEUS SNEAKER

- Stützender Einlagenrohling in Folientechnik
- Glasfaserverstärkter Kunststoffkern
- Tieferlegung Plantarsehnenstruktur
- Fersenpolsterungen aus PU-Polsterelementen (p² resorb/PX absorb)
- Anatomische Gummipelotte
- Langsohlige Multiform-Polsterung in Mehrzonentechnik 3 mm
- OnDry-Bezug dunkelgrau geprägt
- Thermisch verformbar



Deckenpolster in Multiform-Mehrzonentechnik 3 mm

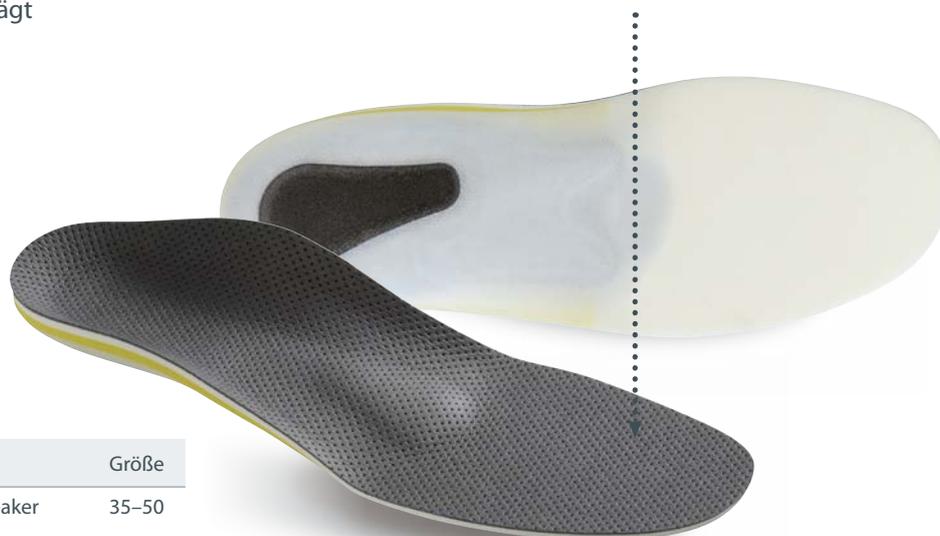

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
989820000	Novaped S90 calcaneus Sneaker	35-50
989820174	Novaped S90 calcaneus Sneaker, Decke lose	35-50

Novaped soft calcaneus

NOVAPED SOFT CALCANEUS RESORB SOFT

- Bettender Einlagenrohling in Weichpolstertechnik (p² resorb)
- Unterbau in Multiforte-Mehrzonentechnik (Multiforte/p² resorb)
- Besonders weicher Fersenauftritt
- Verstärkende Zwischenschicht aus THK (gefenstert)
- Geformte weiche Pelotte
- Langsohlige Multiform-Polsterung in Mehrzonentechnik 4 mm
- OnDry-Bezug dunkelgrau geprägt
- Thermisch anformbar

polsterndes Element
aus p² resorb/soft




Deckenpolster in Multiform-
Mehrzonentechnik 4 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
979828000	Novaped soft calcaneus resorb soft	35-50

NOVAPED SOFT CALCANEUS ABSORB MEDIUM

- Bettender Einlagenrohling in Weichpolstertechnik (p² absorb)
- Unterbau in Multiforte-Mehrzonentechnik (Multiforte/p² absorb)
- Energie absorbierendes Fersenpolster
- Verstärkende Zwischenschicht aus THK (gefenstert)
- Geformte weiche Pelotte
- Langsohlige Multiform-Polsterung in Mehrzonentechnik 4 mm
- OnDry-Bezug dunkelgrau geprägt
- Thermisch anformbar

polsterndes Element
aus p² absorb/medium

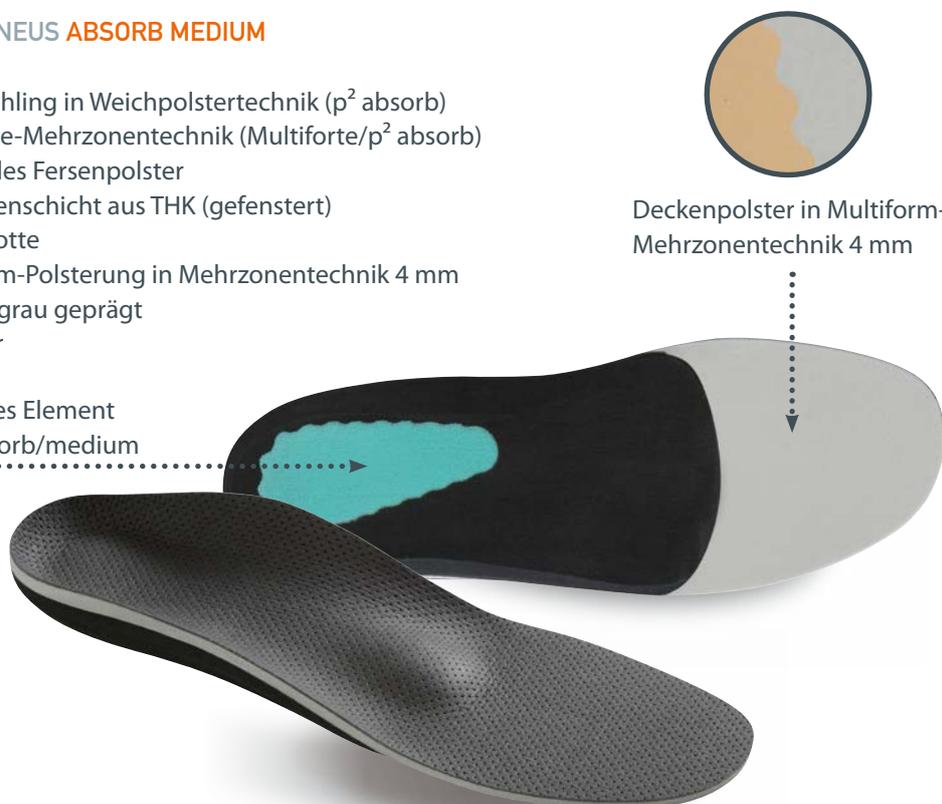

Deckenpolster in Multiform-
Mehrzonentechnik 4 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
979825000	Novaped soft calcaneus absorb medium	35-50

Novaped S90 calcaneus

NOVAPED S90 CALCANEUS BUSINESS

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
989818000	Novaped S90 calcaneus business	35-50
989818174	Novaped S90 calcaneus business, Bezug lose	35-50



NOVAPED S90 CALCANEUS SNEAKER

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
989820000	Novaped S90 calcaneus Sneaker	35-50
989820174	Novaped S90 calcaneus Sneaker, Decke lose	35-50



Novaped soft calcaneus

NOVAPED SOFT CALCANEUS RESORB SOFT

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
979828000	Novaped soft calcaneus resorb soft	35-50



NOVAPED SOFT CACANEUS ABSORB MEDIUM

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe
979825000	Novaped soft calcaneus absorb medium	35-50





03.09.40.08.05.22



099990226

Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid
Germany
Tel. +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
service@schein.de
www.schein.de



Germany since 1879

Wir  helfen