

# Post-Op-Schuhe

by **schein**





Modell **Verbandschuh (Kurzzeit)**  
**Ferse geschlossen**

**Code-Nr. 322146-**

33/34 - 47/48



**Positions-Nr. beantragt**

**Indikationen**


- postoperativ nach Eingriffen am Fuß
- posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera
- bei starker Schwellneigung der Füße

Schuhgröße Innenschuhlänge Innenschuhbreite  
a b

33/34	224 mm	82 mm
35/36	236 mm	86 mm
37/38	250 mm	90 mm
39/40	264 mm	94 mm
41/42	278 mm	98 mm
43/44	292 mm	102 mm
45/46	306 mm	106 mm
47/48	320 mm	110 mm

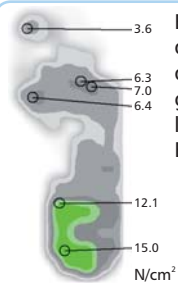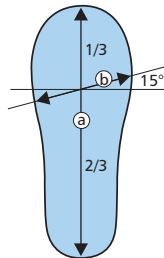

Eine 25 mm starke rigide Keilsohle übernimmt dank ihrer Absatz- und Sohlenrolle die Funktion der Abrollbewegung. Vor allem die Zehengrundgelenke werden dadurch weitestgehend entlastet. Vorhandene Wunden können durch diese Entlastung schneller verheilen.

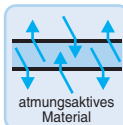

**Besondere Merkmale**

- Klettverschlüsse mit Umlenkrolle




- Klettband kürzbar



- Sohlenkonstruktion



- Achillessehne freigelegt

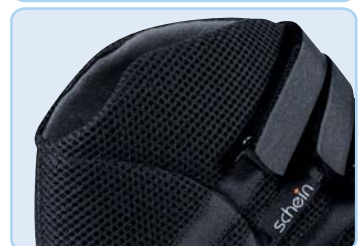



Modell **Verbandschuh (Kurzzeit)**  
**Ferse geschlossen**

Code-Nr. 322046-

33/34 - 47/48

Positions-Nr. 31.03.03.3030

Indikationen

- postoperativ nach Eingriffen am Fuß
- posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera
- bei starker Schwellneigung der Füße

Besondere Merkmale

- Klettband kürzbar



- Sohlenkonstruktion



Schuhgröße	Innenschuhlänge a	Innenschuhbreite b
33/34	224 mm	82 mm
35/36	236 mm	86 mm
37/38	250 mm	90 mm
39/40	264 mm	94 mm
41/42	278 mm	98 mm
43/44	292 mm	102 mm
45/46	306 mm	106 mm
47/48	320 mm	110 mm

3.6  
6.3  
7.0  
6.4  
12.1  
15.0  
N/cm<sup>2</sup>

Eine 30 mm starke rigide Keilsohle übernimmt dank ihrer Absatz- und Sohlenrolle die Funktion der Abrollbewegung. Vor allem die Zehengrundgelenke werden dadurch weitestgehend entlastet. Vorhandene Wunden können durch diese Entlastung schneller verheilen.

SG Innenfutter schadstoffgeprüft  
Medizinprodukt der Klasse I mit CE Kennzeichen  
30°C leicht waschbar  
L R rechts / links einsetzbar  
atmungsaktives Material



## Modell **Vorfußentlastungsschuh**

**Code-Nr. 322147-**

33/34 - 47/48



**Positions-Nr. beantragt**

### Indikationen


- postoperativ nach Eingriffen am Vorfuß
- posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera auf dem Fußrücken oder an den Zehen
- akute Schwellung des Vorfußes bei Gichtanfall oder Bursitis

Schuhgröße    Innenschuhlänge    Innenschuhbreite

	a	b
33/34	224 mm	82 mm
35/36	236 mm	86 mm
37/38	250 mm	90 mm
39/40	264 mm	94 mm
41/42	278 mm	98 mm
43/44	292 mm	102 mm
45/46	306 mm	106 mm
47/48	320 mm	110 mm

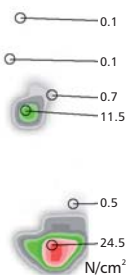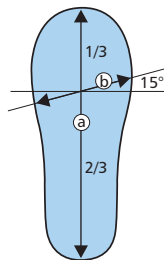

Durch eine 20 mm starke nach vorne hin ansteigende Keilsohle unter dem Rückfuß, wird eine Entlastung des Vorfußes erreicht. Die natürliche Dorsalextension des Vorfußes wird während der Schrittabwicklung verhindert und die plantare Druckbelastung unter dem Vorfuß wird stark minimiert. Der Vorfuß wird in seiner Funktion ruhiggestellt und hat beste Voraussetzungen zur Heilung vorhandener Fußwunden.

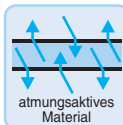

### Besondere Merkmale

- Klettverschlüsse mit Umlenkrolle



- Klettband kürzbar



- Sohlenkonstruktion



- Achillessehne freigelegt





Modell **Vorfußentlastungsschuh**

Code-Nr. 322047-

33/34 - 47/48

Positions-Nr. 31.03.03.5022

Indikationen

- postoperativ nach Eingriffen am Vorfuß
- posttraumatisch nach Vorfuß-Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera auf dem Fußrücken oder an den Zehen
- akute Schwellung des Vorfußes bei Gichtanfall oder Bursitis

Besondere Merkmale

- Klettband kürzbar



- Sohlenkonstruktion



Schuhgröße	Innenschuhlänge a	Innenschuhbreite b
33/34	224 mm	82 mm
35/36	236 mm	86 mm
37/38	250 mm	90 mm
39/40	264 mm	94 mm
41/42	278 mm	98 mm
43/44	292 mm	102 mm
45/46	306 mm	106 mm
47/48	320 mm	110 mm

Durch eine 30 mm starke nach vorne hin ansteigende Keilsohle unter dem Rückfuß, wird eine Entlastung des Vorfußes erreicht. Die natürliche Dorsalextension des Vorfußes wird während der Schrittabwicklung verhindert und die plantare Druckbelastung unter dem Vorfuß wird stark minimiert. Der Vorfuß wird in seiner Funktion ruhiggestellt und hat beste Voraussetzungen zur Heilung vorhandener Fußwunden.

Medizinprodukt der Klasse I mit Kennzeichen

L R

rechts / links einsetzbar



Modell **Verbandschuh (Kurzzeit)**  
**Ferse offen**

Code-Nr. **322048-**

33/34 - 47/48

Positions-Nr. beantragt

Indikationen

- postoperativ nach Eingriffen am Fuß
- posttraumatisch nach Vorfuß- und Rückfußverletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera
- bei starker Schwellneigung der Füße

Besondere Merkmale

- Klettband kürzbar





- Sohlenkonstruktion




Schuhgröße Innenschuhlänge Innenschuhbreite  
a b

33/34	224 mm	82 mm
35/36	236 mm	86 mm
37/38	250 mm	90 mm
39/40	264 mm	94 mm
41/42	278 mm	98 mm
43/44	292 mm	102 mm
45/46	306 mm	106 mm
47/48	320 mm	110 mm

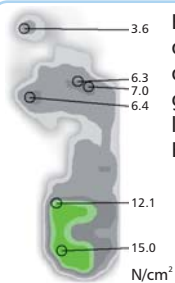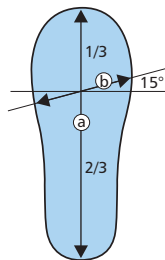

Eine 30 mm starke rigide Keilsohle übernimmt dank ihrer Absatz- und Sohlenrolle die Funktion der Abrollbewegung. Vor allem die Zehengrundgelenke werden dadurch weitestgehend entlastet. Vorhandene Wunden können durch diese Entlastung schneller verheilen.

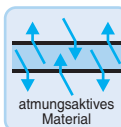



Modell **Rückfußentlastungsschuh**

Code-Nr. 322003-

33/34 - 47/48

Positions-Nr. 31.03.03.5023

Indikationen

- postoperativ nach Eingriffen am Rückfuß
- posttraumatisch nach Rückfuß-Verletzungen
- bei offenen Wunden und Ulcera an der Ferse
- bei schmerzhaften, entzündlichen Erkrankungen des Rückfußes

Besondere Merkmale

- Klettband kürzbar




- Sohlenkonstruktion





Schuhgröße Innenschuhlänge Innenschuhbreite

	a	b
33/34	224 mm	82 mm
35/36	236 mm	86 mm
37/38	250 mm	90 mm
39/40	264 mm	94 mm
41/42	278 mm	98 mm
43/44	292 mm	102 mm
45/46	306 mm	106 mm
47/48	320 mm	110 mm

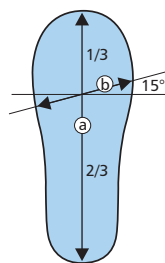

Durch eine 40 mm starke rigide Keilsohle unter dem Vorfuß wird der Rückfuß entlastet. Unter dem Rückfuß ist keine Sohle vorhanden. Das Verhältnis zwischen Rückfuß und Vorfuß beträgt 25% zu 75%, das heißt, die Keilsohle beginnt erst im Mittelfußbereich. Der Neigungswinkel der Sohle beträgt nach vorne hin laufend 7°. Dadurch wird das Körpergewicht auf den Vorfuß verlagert, der Rückfuß wird komplett entlastet und bietet beste Voraussetzungen zur schnellen Wundheilung.

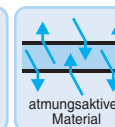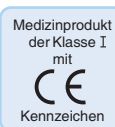



**Blatteinsatz  
für Post-Op-Schuhe**



322149-  
passend für  
322146- / 322147-



322049-  
passend für  
322046- / 322047- / 322048- / 322003-

**Einlegesohlen  
für Post-Op-Schuhe**

Weichpolster-Sohlenausstattungen gehören zum Lieferumfang der Post-Op-Schuhe von schein.

Zu den bewährten Eigenschaften zählen:

- extrem hohe Druckfestigkeit und Rückstellkraft
- feine, regelmäßige, geschlossene Zellstruktur
- gute mechanische Festigkeit
- Temperaturbeständigkeit von -80°C bis +80°C
- thermoplastisch, nicht schrumpfend

Code-Nr.: 010697 -



Für individuelle Versorgungen steht der Multiform-Schaumstoff auch als Plattenware zur Verfügung, Code-Nr. 010599-  
Tafelmaße: ca. 1.100 x 1.100 mm

Ihr Fachhändler

